


Спецификация адаптеров Люэра (Luer Adapter)

Адаптеры Люэра типа «папа» с наконечником «ёлочка» (Male Luer-to-Barb):



Модель	Описание	Внутренний диаметр трубки (мм)	Материал
RH-G016	Адаптер Люэра типа «папа» с наконечником «ёлочка» на 1.6 мм	0.8-1.6мм	Полипропилен
RH-G024	Адаптер Люэра типа «папа» с наконечником «ёлочка» на 2.4 мм	1.6-2.4 мм	
RH-G032	Адаптер Люэра типа «папа» с наконечником «ёлочка» на 3.2 мм	2.4-3.2 мм	
RH-G040	Адаптер Люэра типа «папа» с наконечником «ёлочка» на 4.0 мм	3.2-4.0 мм	
RH-G048	Адаптер Люэра типа «папа» с наконечником «ёлочка» на 4.8 мм	4.0-4.8 мм	
RH-G064	Адаптер Люэра типа «папа» с наконечником «ёлочка» на 6.4 мм	4.8-6.4 мм	

Размер разъема адаптеров Люэра типа «папа» с наконечником «ёлочка» (Male Luer-to-Barb), единица измерения мм:

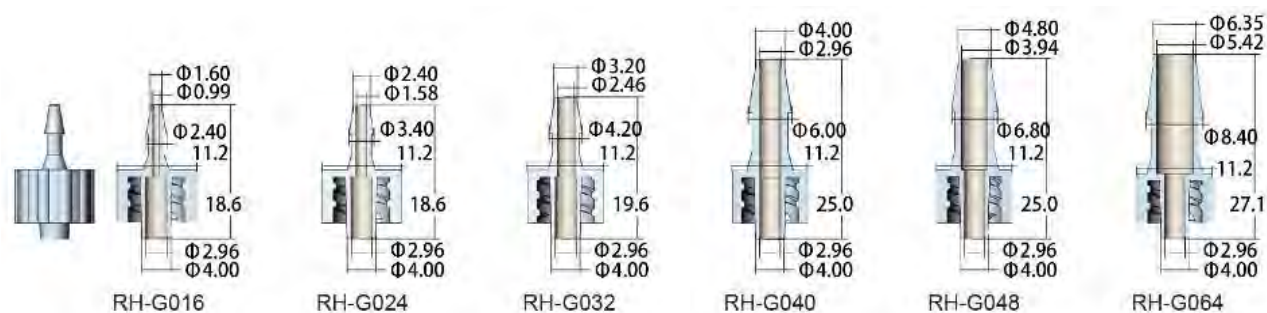


Адаптеры Люэра типа «мама» с наконечником «ёлочка» (Female Luer to Barbed Adapters):




Модель	Описание	Внутренний диаметр трубки (мм)	Материал
RH-M016	Адаптер Люэра типа «мама» с наконечником «ёлочка» на 1.6 мм	0.8-1.6 мм	Полипропилен
RH-M024	Адаптер Люэра типа «мама» с наконечником «ёлочка» на 2.4 мм	1.6-2.4 мм	
RH-M032	Адаптер Люэра типа «мама» с наконечником «ёлочка» на 3.2 мм	2.4-3.2 мм	

RH-M040	Адаптер Люэра типа «мама» с наконечником «ёлочка» на 4.0 мм	3.2-4.0 мм	
RH-M048	Адаптер Люэра типа «мама» с наконечником «ёлочка» на 4.8 мм	4.0-4.8 мм	
RH-M064	Адаптер Люэра типа «мама» с наконечником «ёлочка» на 6.4 мм	4.8-6.4 мм	

Размер разъема адаптеров Люэра типа «мама» с наконечником «ёлочка», единица измерения мм:

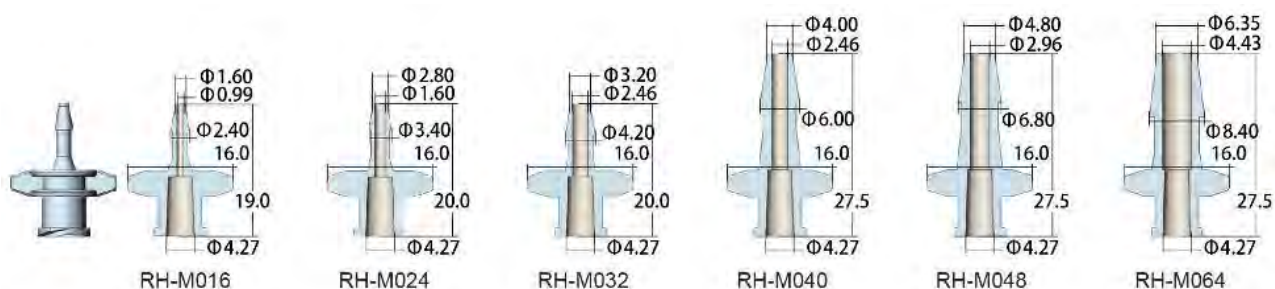


Переходники для соединения адаптеров Люэр – Люэр (Luer-to-Luer Adapters):

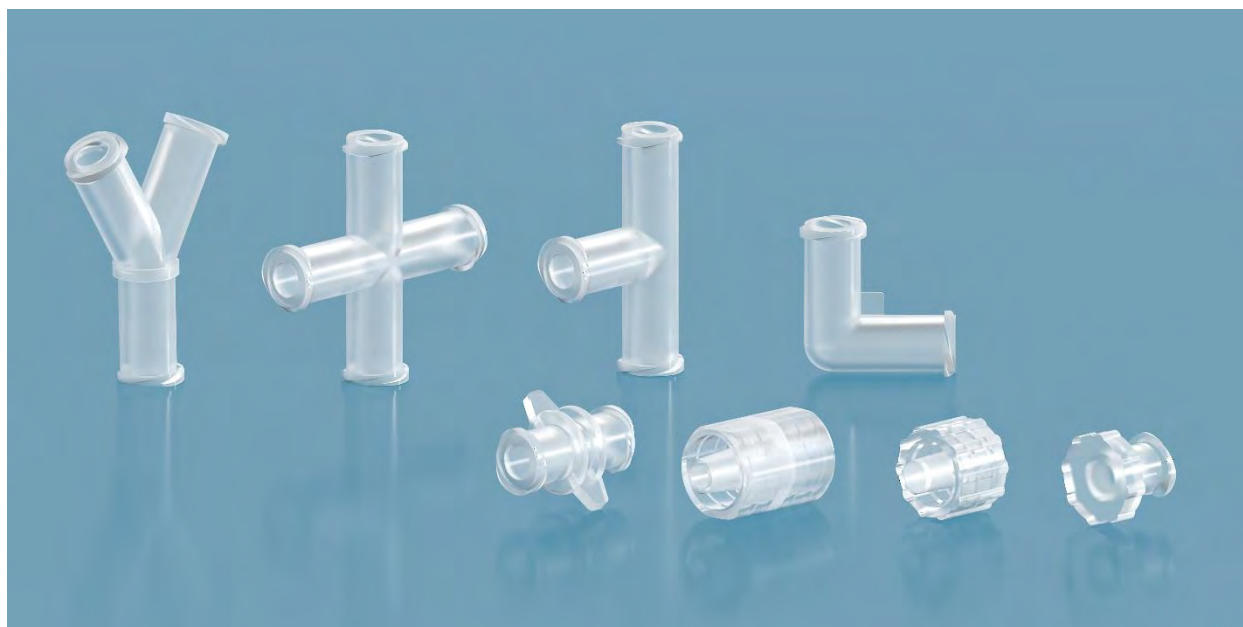

Модель	Описание	Материал
RH-2G	Прямой переходник для адаптеров типа «папа», Male Luer×Male Luer	Полипропилен
RH-2M	Прямой переходник для адаптеров типа «мама», Female Luer×Female Luer	
RH-2M-L	L- тип адаптера Люэра типа «мама»	
RH-3M-Y	Y- тип адаптера Люэра типа «мама»	

RH-3M-T	T- тип адаптера Люэра типа «мама»	
RH-4M	Тип крестик адаптера Люэра типа «мама»	
RH-G-D	Разъем адаптера Люэра типа «папа» (Luer Plug)	
RH-M-D	Разъем адаптера Люэра типа «мама» (Luer Plug)	

Размер переходников для соединения адаптеров Люэр – Люэр, единица измерения мм:

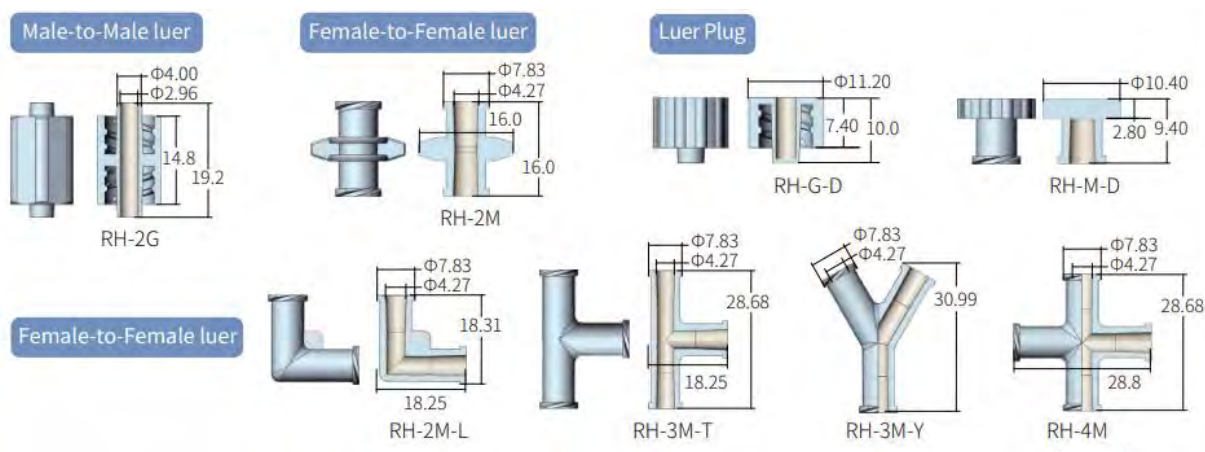

Адаптеры Люэра с резьбой (Luer-to-Thread Adapters):



Модель	Описание	Материал
RH-G-(1/4-28)N	Адаптер Люэра «папа» для 1/4-28UNF адаптера «мама» с резьбой	Полипропилен
RH-M-(1/4-28)N	Адаптер Люэра «мама» для 1/4-28UNF адаптера «мама» с резьбой	
RH-G-(1/4-28)W	Адаптер Люэра «папа» для 1/4-28UNF адаптера «папа» с резьбой	

RH-M-M10W	Адаптер Люэра «мама» для M10 адаптера папа» с резьбой	
RH-M-(1/4-28)W	Адаптер Люэра «мама» для 1/4-28UNF адаптера папа» с резьбой	

Размеры адаптеров Люэра с резьбой, единица измерения мм:




Комплект с адаптером Люэра типа «мама» для крепежа на поверхности (Female Luer Bulkhead):




Модель	Описание	Внутренний диаметр трубки (мм)	Материал
RH-C-M016	Адаптер Люэра с концом типа «ёлочка» на 1.6 мм	0.8-1.6 мм	Полипропилен медицинского класса
RH-C-M024	Адаптер Люэра с концом типа «ёлочка» на 2.4 мм	1.6-2.4 мм	
RH-C-M032	Адаптер Люэра с концом типа «ёлочка» на 3.2 мм	2.4-3.2 мм	
RH-C-M040	Адаптер Люэра с концом типа «ёлочка» на 4.0 мм	3.2-4.0 мм	
RH-C-M048	Адаптер Люэра с концом типа «ёлочка» на 4.8 мм	4.0-4.8 мм	
RH-C-M064	Адаптер Люэра с концом типа «ёлочка» на 6.4 мм	4.8-6.4 мм	
C06	1/4-28UNF Статор для монтажа	/	
C10	M10 Статор для монтажа	/	
LM-1/4-28P	1/4-28UNF Крепежная гайка	/	
LM-M10P	M10 Крепежная гайка	/	

Размеры адаптеров Люэра типа «мама» в комплекте (Female Luer Bulkhead):

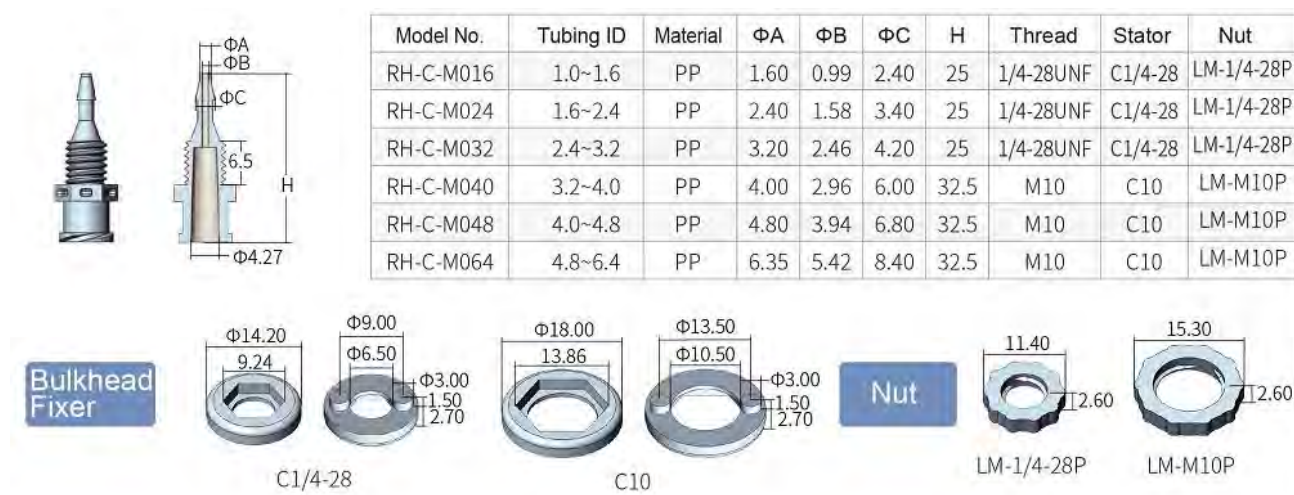

Этапы монтажа комплекта с адаптером Люэра типа «мама» (Female Luer Bulkhead):

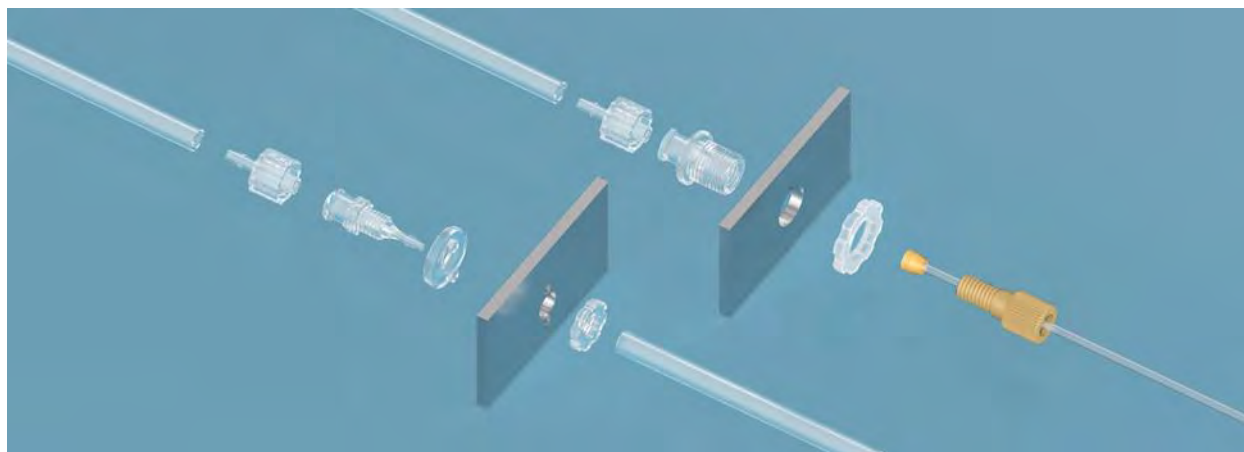

Шаг 1. Просверлите отверстие на панели или доске. Диаметр отверстия должен быть такой же или немного больше, чем диаметр наружной резьбы статора (1/4–28 или M10 варьируется в зависимости от номера модели) адаптера Люэра.

Шаг 2. Просверлите два небольших отверстия для монтажа статора. Диаметр данных отверстий такой же или немного больше внешнего диаметра тиснения статора (диаметр 3.0 мм, глубина 1.5 мм).

Шаг 3. Вставьте монтажный статор в два небольших отверстия, проденьте через него адаптер Люэра.

Шаг 4. Закрутите фиксирующую гайку на адаптере до тех пор, пока она не будет хорошо затянута.

Шаг 5. Присоедините к адаптеру из комплекта подходящий по размеру адаптер Люэра типа «папа» (Male Luer-to-Barb). Убедитесь, что адаптеры плотно прилегают друг к другу.

Шаг 6. Присоедините подготовленные 2 гибкие трубки/шланги к концам адаптеров Люэра.

